



TECHNOLOGIA, NA KTÓRĄ CZekaŁeŚ



Halo iQ | SoundLens iQ | Muse iQ
(Synergy)



Twoje zdrowie ma bardzo duży wpływ na Twój słuch

Stworzone, aby **wzbogacać** każde doświadczenia słuchowe

100%

specjalistów zgadza się, że korzystanie z aparatów słuchowych ma wpływ na jakość życia osób z ubytkiem słuchu¹.



8 z 10

pacjentów potwierdza, że dzięki aparatom słuchowym poprawiła się jakość ich życia¹.



3 z 4

pacjentów korzystających z aparatów słuchowych potwierdza, że dzięki nim, mają **większą pewność w kontaktach międzyludzkich**¹.

W dzisiejszych czasach, użytkownicy aparatów słuchowych chcą usłyszeć każdy szczegół ze swojego życia.

Nowe rewolucyjne linie produktów - **Muse iQ**, **Halo iQ** i **Soundlens Synergy iQ** - pozwalają użytkownikom doświadczać każdego szczegółu otaczającego świata, jak nigdy dotąd.

Zbudowane na **platformie Synergy** z systemem **Acuity OS 2** aparaty słuchowe iQ pomagają angażować się w życie w bogatszy i bardziej indywidualny sposób.

Wiemy, że aparaty słuchowe zapewniają lepszy słuch, 8 na 10 pacjentów zgłasza, że korzystanie z aparatów słuchowych polepsza jakość ich życia.

Insights from
WebMD

WebMD does not endorse any products or services.

¹ 2017 WebMD Healthcare Professional and Hearing Aid Wearer Study, commissioned by Starkey Hearing Technologies.

*Healthcare professionals (physicians, audiologists and hearing care professionals) who regularly diagnose hearing loss as part of their practice.



Przedstawiamy IQ

Dźwięki, które możesz poczuć



Z przyjemnością przedstawiamy najnowsze aparaty słuchowe **Muse iQ**, **Halo iQ** i **SoundLens Synergy iQ** - dostarczające wyjątkowe wrażenia słuchowe, poprawioną jakość dźwięku i niezawodną technologię, które składają się na jeszcze większe zadowolenie pacjenta.

Bycie w pełni obecnym w danej chwili wiąże się z poczuciem "zanurzenia"- czyli całkowitym połączeniem pomiędzy dźwiękiem, a otoczeniem. Aż do premiery najnowszej linii iQ, żadna inna technologia nie była w stanie zapewnić tak zaawansowanych wrażeń słuchowych.



Acuity Immersion

Acuity Immersion - powstała z wykorzystaniem badań wirtualnej rzeczywistości. Nowa funkcja Acuity Immersion jest doskonałym rozwiązaniem dla osób korzystających z aparatów CIC (Muse iQ) oraz IIC (SoundLens Synergy iQ). Te niewielkie urządzenia wyposażone w precyzyjne mikrofony, dostarczają algorytmowi AI ważnych wskazówek potrzebnych do orientacji przestrzennej, zapewniającej umiejętność zlokalizowania źródła, z którego dobiega dźwięk. Funkcja Acuity Immersion kieruje powyższe wskazówki (dźwięki) do obszaru słyszalnego przez użytkownika nie zakłócając jednocześnie dźwięków mowy. Użytkownik przystosowuje się do nowych i pełniejszych doznań oraz wzmocnione zostaje poczucie kierunku z którego dobiega dźwięk, dzięki czemu może doświadczyć pełniejszego kontaktu ze światem.



Kierunkowość Acuity Immersion

Kierunkowość Acuity Immersion - Technologia, która przywraca wzorzec naturalnej kierunkowości, którą zapewnia małżowina uszna, eliminując jednocześnie dotychczasowe problemy wynikające z lokalizacji mikrofonów w aparatach słuchowych. Dzięki powyższemu rozwiązaniu użytkownicy naszej nowej technologii kierunkowej mogą cieszyć się z bardziej naturalnej percepcji dźwięków przestrzennych w większości środowisk akustycznych, oraz z zaawansowanego systemu mikrofonów kierunkowych w głośniejszych i wymagających środowiskach akustycznych.



Wskazówki Słowne dla Programów

Od teraz dzięki wprowadzeniu **słów - kluczy**, korzystanie z aparatów słuchowych stało się jeszcze bardziej wygodne i przyjazne dla użytkownika. Wskazówki słowne w praktyczny sposób określają przeznaczenie danego programu, jednocześnie eliminując konieczność zapamiętywania numerów.



Smart VC Inteligentna Regulacja Głośności

W dotychczasowych potencjometrach głośności regulacja wzmocnienia ograniczona była poprzez najgłośniejszy punkt charakterystyki aparatu słuchowego, po osiągnięciu którego pozostałe dźwięki nie mogły być podwyższone. Dzięki nowemu rozwiązaniu **Smart VC** użytkownik aparatu słuchowego może zwiększyć głośność urządzenia w pozostałych kanałach, gdzie pozostała jeszcze rezerwa wzmocnienia. Dostępne w Muse iQ oraz SoundLens Synergy iQ.

Technologia, która podąża za Twoim aktywnym życiem

System **Acuity OS 2** wyposażony w Inteligencję Interaktywną to najnowszy system operacyjny Starkey pięć razy szybszy niż jego poprzednik, dotrzymujący kroku szybkiemu tempu życia pacjentów.

Inteligencja Interaktywna szybko i nieustannie dostosowuje się do zmieniających się sytuacji akustycznych, w których obecny jest sygnał mowy, pozwalając pacjentom na swobodne przemieszczanie się z jednego miejsca w inne, nie tracąc przy tym ani jednego słowa.

Acuity Immersion

Dzięki nowej technologii Acuity Immersion użytkownik aparatu słuchowego ma możliwość dokładniejszego i pełniejszego lokalizowania dźwięków przestrzennych. Dzięki czemu doświadczaj bardziej naturalnych doznań dźwiękowych (CIC, IIC).

Kierunkowość Acuity Immersion

Kierunkowość Acuity Immersion - zapewnia bardziej naturalne wrażenia słuchowe dla wszystkich produktów z mikrofonami kierunkowymi, nawet w najtrudniejszych warunkach akustycznych.

Acuity Quiet

Acuity Quiet - dzięki ulepszonemu algorytmowi oraz we współpracy z Acuity Voice, jeszcze lepiej wycisza hałas o niskim natężeniu, zapewniając jeszcze lepszy i dokładniejszy odbiór dźwięków.

Analizator środowiska akustycznego Acuity

Analizator środowiska akustycznego Acuity - dzięki unikalnej metodzie rozpoznawania i klasyfikacji dźwięków aparat słuchowy samoczynnie dostosowuje się do otaczającego środowiska akustycznego. Adaptacja wzmocnienia zależy od natężenia dźwięku oraz częstotliwości. Ustawienia mogą być dedykowane niezależnie dla każdego z programów.

Muzyka

Muzyka - dzięki zastosowaniu podwójnego systemu kompresji, oraz dedykowanemu programowi Muzyka - umożliwiliśmy użytkownikowi aparatu słuchowego, słuchanie muzyki w zupełnie nowy, pełniejszy i niczym nie zakłócony sposób.

Wskazówki Słowne dla Programów

Wskazówki Słowne dla Programów - nowe, dodatkowe głosowe wskaźniki pamięci (np. restauracja, dom...).

Smart VC

Smart VC - Umożliwia wzrost dB w dostępnych kanałach jeśli jeden kanał osiągnie maksimum, pozwalając użytkownikom na oczekiwanie zwiększenie głośności. Pozwala zapewnić większy zakres regulacji głośności niż, w poprzednich urządzeniach (Muse iQ oraz SoundLens Synergy iQ).

WhistleFree Feedback

Whistle Free Feedback - najlepszy na rynku system eliminacji sprzężeń zwrotnych zapewnia komfortowe słyszenie bez niepożądanego piszczenia.

Speech Shift

Speech Shift - technologia obniżająca częstotliwość, poprawia słyszenie w czasie rzeczywistym poprzez identyfikację mowy o wysokiej częstotliwości i replikowanie jej w niższych częstotliwościach, gdzie stają się słyszalne dla użytkownika.

Multiflex Tinnitus

Multiflex Tinnitus - zaawansowana technologia, która przynosi ulgę osobom, które cierpią z powodu szumów usznych.

Surface Nanoshield

Powłoka Nanoshield - pionierski system odporny na wilgoć, woskowinę i wodę, chroni aparat słuchowy i zapewnia jego wytrzymałość i niezawodność.



Bezprzewodowe
strumieniowanie.
Wyjątkowa jakość
dźwięku.



Starkey zapewnia
dwie technologie
komunikacji
bezprzewodowej:
Trulink oraz **900 sync**.

Połączenie platformy
Synergy i technologii
zapewniającej
komunikację
bezprzewodową
dostarcza
użytkownikom
najnowszej linii
aparatów słuchowych
iQ bardzo wysoką
jakość i komfort
podczas odbioru
dźwięków.

Technologia 900 sync



Technologia 900 sync dedykowana między innymi bezprzewodowym aparatom słuchowym Muse iQ i Soundlens Synergy iQ, została zaprojektowana w taki sposób, aby użytkownicy mieli możliwość bezprzewodowego przesyłania z urządzeń audio bezpośrednio do swoich aparatów słuchowych naturalnie brzmiących dźwięków o wysokiej jakości.

***Innowacyjna linia akcesoriów Surflink
w połączeniu z naszymi bezprzewodowymi
aparatami słuchowymi pozwala żyć tak, jak chcesz,
bez dodatkowych urządzeń, czy przewodów.***

Technologia 900 sync zapewnia:

- strumieniowanie Ear-to-Ear,
- stałą wydajność, nawet w najbardziej wymagających środowiskach akustycznych,
- działanie bezprzewodowego systemu CROS/ BICROS dla standardowych produktów Muse iQ.

Technologia Trulink

Uniwersalność aparatów słuchowych Halo iQ zapewniona jest dzięki wykorzystaniu technologii bezprzewodowej 2,4 GHz, która pozwala na bezproblemową komunikację z urządzeniami Apple: iPhone, iPad, iPod Touch, Apple Watch. Ale to nie wszystko, Halo iQ pozwala również na komunikację z wybranymi urządzeniami z systemem Android.

Dzięki nowemu **pilotowi Trulink** użytkownicy zyskują dodatkowe możliwości wygodnego sterowania swoim aparatem słuchowym.

Aplikacja Trulink niezmiennie zapewnia szerokie możliwości optymalizacji i ustawień aparatu słuchowego pod indywidualne preferencje jego użytkownika.

Dzięki Halo iQ wraz z aplikacją Trulink, użytkownicy aparatów słuchowych mogą w bardziej komfortowy i indywidualny sposób cieszyć się z otaczającego ich świata dźwięków.



Akcesoria dla każdego pacjenta i każdego stylu życia

TRULINK®

Pobierz aplikację Trulink Hearing Control z AppStore lub Google Play.

TRULINK® 2.4 GHz

SURFLINK® 900 MHz

Rodzina akcesoriów Surflink zapewnia rozwiązanie dla każdej potrzeby, w każdym środowisku akustycznym.


SURFLINK®

Usłyszysz wszystko,
co się dzieje wokół
Ciebie

Środowiska akustyczne

Nowa linia produktów Starkey została zaprojektowana w celu poprawy słyszenia w każdym, nawet najcięższym środowisku akustycznym, w którym przebywają użytkownicy aparatów słuchowych.


Style aparatów słuchowych z technologią iQ

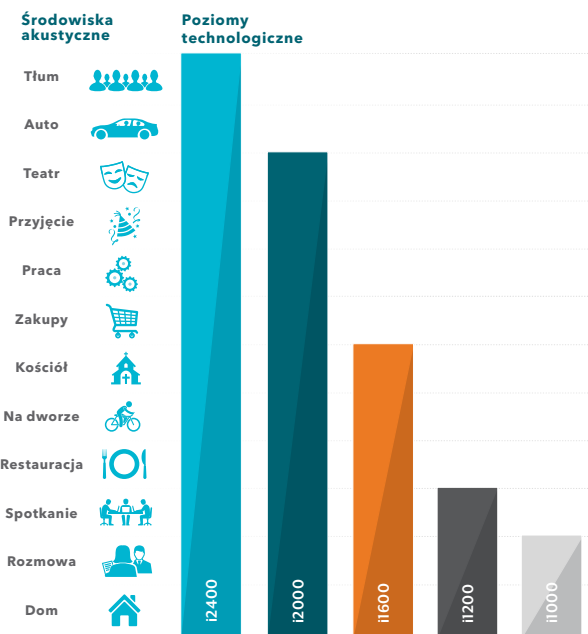

Poziomy dopasowania

Poziomy	i2400	i2000	i1600	i1200	i1000
Platforma: Synergy	●	●	●	●	●
Obrazowanie dźwięku: Pasma przenoszenia	24	20	16	12	10
Pasmo: Rozszerzone 10 KHz	●	●	●		
System peracyjny: Acuity OS 2	●	●	●	●	●
Technologia bezprzewodowa: 900sync (Muse IQ, Soundloens iQ)	●	●	●	●	●
Technologia bezprzewodowa: Trulink (Halo iQ)	●	●	●	●	●
Strumieniowanie bezprzewodowe: Pristine Audio Streaming	●	●	●	●	●
Optymalizacja mowy: Acuity Speech Optimization	●	▶	▶	▶	▶
Świadomość przestrzenna: Acuity Immersion (CIC,IIC)	●	●	●		
Optymalizacja muzyki: Music Enhancement	●	●	●		
Pamięć	●	●	●		
Adaptacja muzyki	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Adaptacja muzyki E2E	●	▶	▶		
Technologia Ear-to-Ear: Obustronne mapowanie przestrzenne	●	▶	▶		
E2E adaptacja wiatru	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
E2E adaptacja hałasu mechanicznego	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
E2E Kierunkowość	●	●	●		
E2E Phone Streaming	●	●	●		
Analizator sceny akustycznej: Acuity Lifescape Analyzer	●	●	●	●	●
Muzyka	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Mowa	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Mowa w hałasie	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Hałas mechaniczny	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Wiatr	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Hałas	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Cisza	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Kierunkowość: Acuity Immersion	●	▶	▶	▶	▶
Kanale	24	20	16	12	10
Impresja	●	●	●	▶	
Adaptacyjny	●	▶	▶	▶	
Dynamiczny	●	▶	▶	▶	▶
Kierunkowy	●	▶	▶	▶	▶
Redukcja hałasu: Acuity Voice	●	▶	▶		
Sila redukcji hałasu	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Eliminator sprzężenia: WhistleFree Feedback Cancellation	●	●	●	●	●
Przeniesienie częstotliwości: Speech Shift	●	●	●	●	●
Redukcja szumów usznych: Multiflex Tinnitus	●	●	●	●	●
Akcesoria bezprzewodowe: Akcesoria Surfink (Muse iQ, Soundlens iQ)	●	●	●	●	●
Opcja ładowania (Muse IQ RIC 312)	●	●	●	●	●



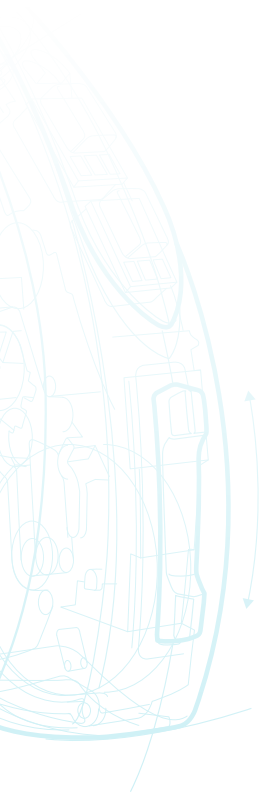

Najbardziej aktualne informacje o kompatybilności Halo iQ i TruLink, znajdą Państwo na stronie: [TruLinkHearing.com](https://www.TruLinkHearing.com).

"Stworzone dla iPod," "Stworzone dla iPhone," i "Stworzone dla iPad" wskazują, iż dany produkt został zaprojektowany do łączności ze wskazanym w oznaczeniu urządzeniem i uzyskał certyfikat spełniający wymagania i standardy firmy Apple.

Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie urządzenia lub jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa.